



## APLICACIÓN LAUDA COMMAND

Control intuitivo de los equipos con smartphone, tableta y PC

# Aplicaciones LAUDA Command y Command Professional

## Regulación de temperatura en la punta de los dedos

Experimente una nueva era del control de equipos, con una mayor eficiencia y con la facilidad de uso como prioridad. La aplicación LAUDA Command es su compañero de confianza para una integración perfecta y un rendimiento optimizado. El lugar de instalación y el manejo son independientes entre sí y permiten por tanto el acceso desde cualquier lugar. La aplicación LAUDA Command Professional ofrece opciones de ajuste adaptadas, funciones de análisis ampliadas y ambiciosas opciones de control.

### Descarga


Aplicación disponible de manera gratuita en:



# Aplicación LAUDA Command

## Regulación precisa de temperatura en una sola mano

Ya sea desde el smartphone, tableta o PC, la aplicación (iOS, Windows, Android) permite en todo momento y desde cualquier lugar dentro de la red de la empresa ajustar los valores de temperatura, iniciar o detener procesos y llevar a cabo ajustes individuales para los equipos LAUDA.

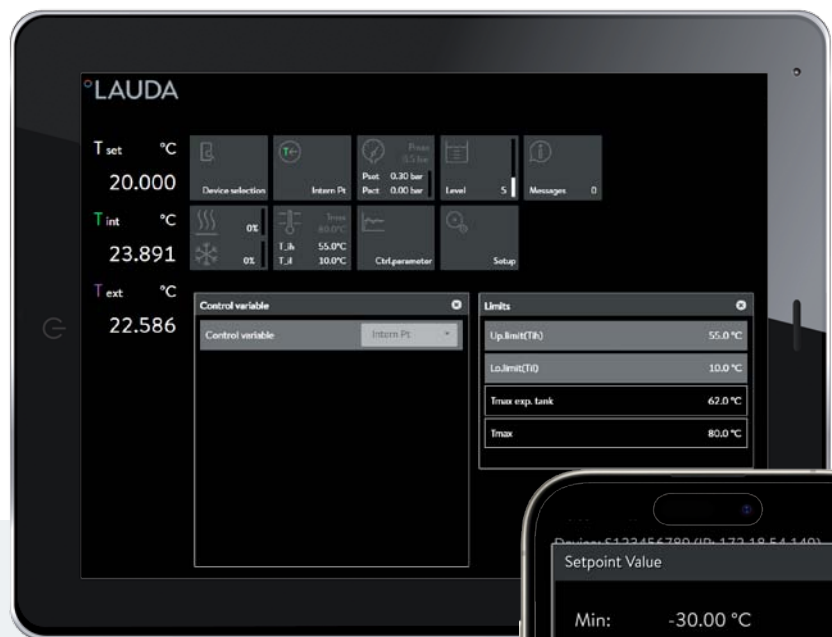

### LAUDA Command (gratuita)

- **Selección de equipo:** selección sencilla del equipo utilizado
- **Valor nominal de temperatura:** introducción directa del valor nominal de la temperatura ( $T_{set}$ )
- **Modificación de parámetros:** según las aplicaciones, es posible establecer individualmente magnitudes controladas, parámetros de regulación, parámetros de nivel, magnitudes de ajuste y límites de temperatura
- **Mensajes:** todas las alarmas, mensajes de error y advertencias que hayan podido activarse en el equipo están disponibles en la aplicación
- **Ajustes básicos:** administración de idioma, unidades de temperatura y mucho más con solo unos pocos clics
- **Standby/funcionamiento:** encendido y apagado del equipo (standby) gracias al control intuitivo

Líneas de equipos	Vers. incrustada
-------------------	------------------

Integral IN	de 1.52
-------------	---------

Variocool*	de 1.76
------------	---------

Universa	todas las versiones
----------	---------------------

\* Se necesita Ethernet Modul Advanced (LRZ 930)



Aplicación LAUDA Command

# Aplicación LAUDA Command Professional

## Excelencia en el control de la temperatura

Las funciones ampliadas, que superan a las de la aplicación LAUDA Command, permiten reconocer tendencias, llevar a cabo adaptaciones y garantizar una elevada reproducibilidad de los procesos de regulación de temperatura con mayor facilidad. La aplicación LAUDA Command Professional presenta como elementos principales la creación y gestión de perfiles de regulación de temperatura controlados por tiempo, visualización intuitiva de los datos de temperatura, así como un registro ininterrumpido de datos.



### LAUDA Command Professional

- **Todas las ventajas de la aplicación LAUDA Command**
- **Programador:** el programador permite programar, memorizar e iniciar un programa de temperatura en función del tiempo. Se pueden guardar cinco programas diferentes, que se pueden exportar e importar en otros dispositivos
- **Gráfico de temperatura:** las variaciones de temperatura pueden verse mediante gráficos y exportarse como archivos de imagen
- **Registro de datos:** los parámetros disponibles en el gráfico de temperatura pueden registrarse y exportarse para analizarlos posteriormente o para crear informes
- **Regulación de caudal:** En los equipos de termostatización, se pueden ajustar y visualizar caudales volumétricos en combinación con la regulación de caudal LAUDA (MID 80, FC 80 C)

Número de pedido: D000089

Línea de equipos


Vers. incrustada

Integral IN

de 1.57 en adelante

Universa

todas las versiones

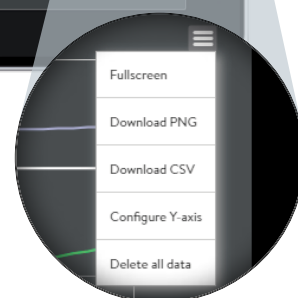

Aplicación LAUDA Command Professional



Controle su solución de regulación de temperatura LAUDA directamente desde su terminal móvil o PC. La aplicación LAUDA Command se instala rápidamente y es fácil de configurar.



El acceso a los equipos está protegido con los más altos estándares de seguridad, como la autenticación de dos factores y HTTPS.



La compatibilidad de la aplicación se seguirá ampliando para más líneas de equipos. Se lleva a cabo un continuo desarrollo de funciones adicionales innovadoras para ampliar la funcionalidad de la aplicación.

Iniciar su equipo de termorregulación LAUDA directamente desde un terminal móvil u ordenador: con la aplicación LAUDA puede configurar y controlar de manera cómoda y variada su equipo.

Las siguientes marcas son marcas registradas de  
LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG:  
LAUDA Microcool®, LAUDA Universa®, LAUDA Variopumpe®,  
Kryomat®, Kryopac®, Mobifreeze®, Ultratemp®, Variocool®

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • Alemania  
[www.lauda.de](http://www.lauda.de)

