



## APPLICATION LAUDA COMMAND

Contrôle intuitif de l'appareil avec smartphone, tablette et PC


# Applications LAUDA Command et Command Professional

## Thermorégulation d'un simple toucher

Découvrez une nouvelle ère dans le contrôle d'appareil, qui améliore l'efficacité et met l'accent sur la facilité d'utilisation. L'application LAUDA Command est votre partenaire de confiance pour une intégration transparente et une optimisation des performances de vos solutions de thermorégulation. Le site d'installation et la commande sont dissociés, ce qui permet un accès indépendant de l'emplacement. L'application LAUDA Command Professional offre des options de réglage personnalisées, des fonctions d'analyse avancées et des options de contrôle sophistiquées.

### Téléchargement


Téléchargement gratuit de l'application sur :

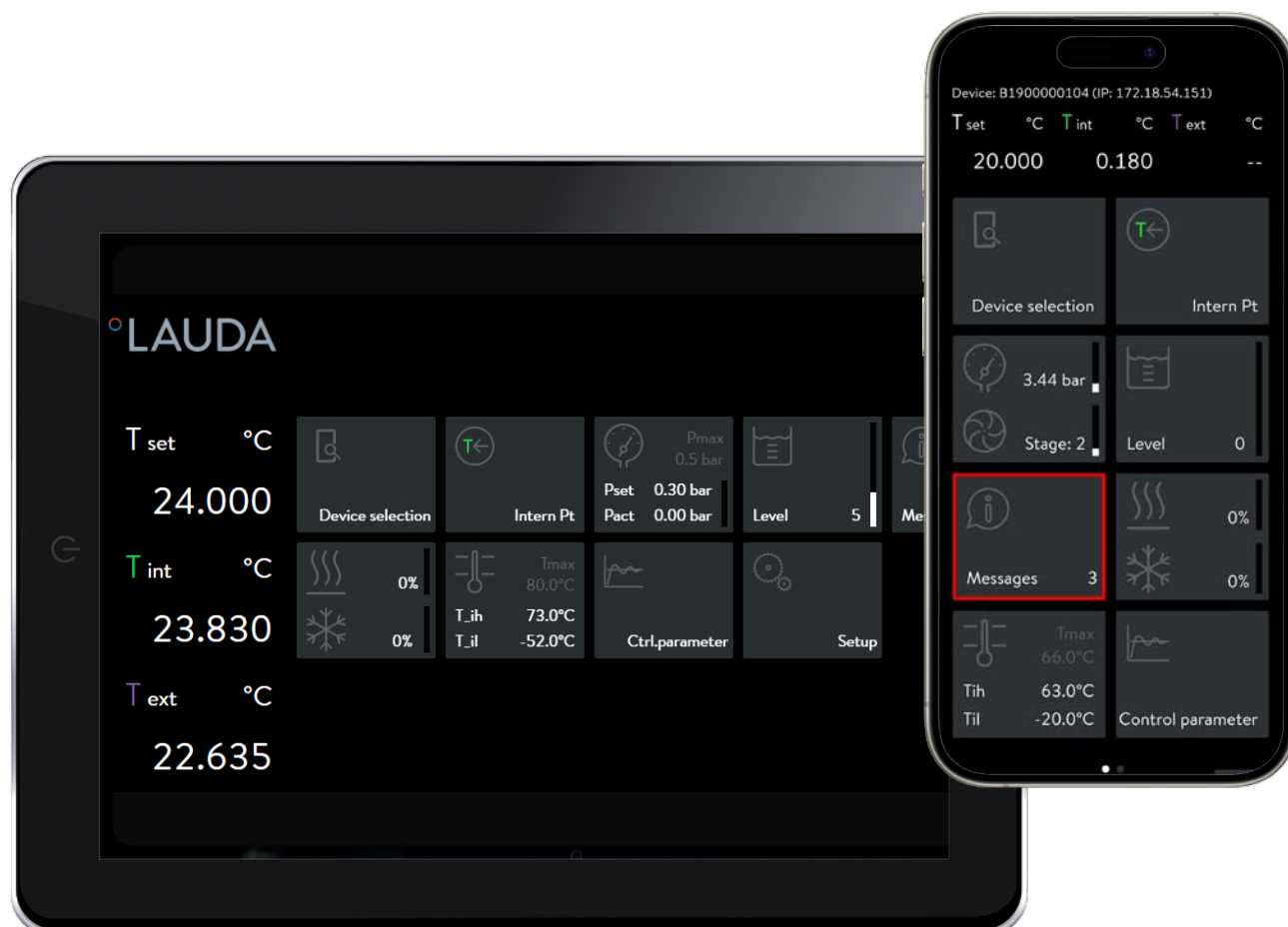

# Application LAUDA Command

## Thermorégulation précise d'une main

Qu'il s'agisse d'un smartphone, tablette ou PC, l'application (iOS, Windows, Android) permet de régler les valeurs de consigne de température, de démarrer ou d'arrêter les processus et d'effectuer des réglages individuels pour les appareils LAUDA, à tout moment et de partout au sein du réseau de l'entreprise.

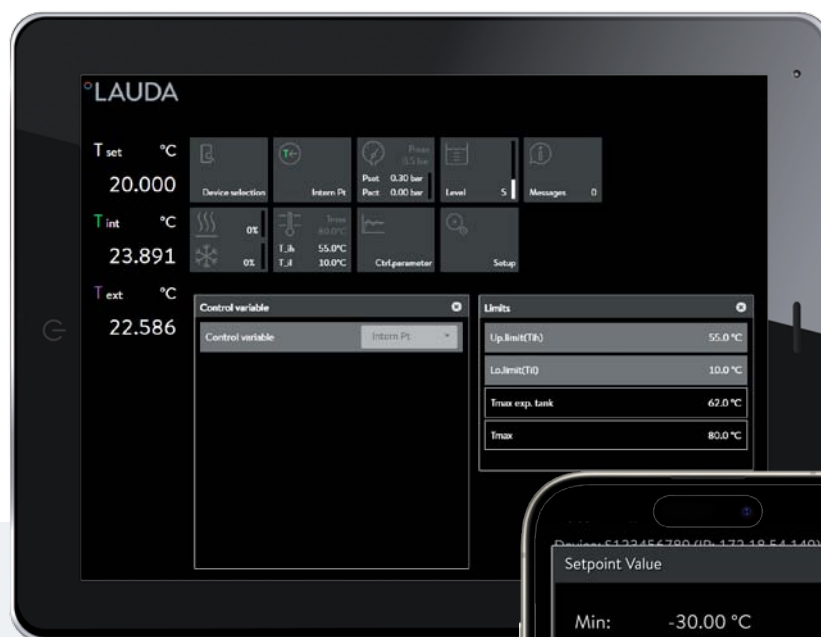

### LAUDA Command (gratuit)

- **Choix de l'appareil** : sélection facile de l'appareil à utiliser
- **Consigne de température** : saisie directe de la valeur de consigne de la température ( $T_{set}$ )
- **Modification des paramètres** : selon les applications, il est possible de définir individuellement les grandeurs de régulation, les paramètres de régulation, les paramètres de niveau, les grandeurs de réglage ainsi que les limites de température
- **Messages** : toutes les alarmes, tous les messages d'erreur et tous les avertissements éventuellement déclenchés sur l'appareil sont disponibles dans l'application
- **Réglages de base** : gestion de la langue, des unités de température et bien plus encore en quelques clics
- **Veille/fonctionnement** : allumer/éteindre l'appareil (stand-by) grâce au contrôle intuitif

| Lignes de produits | Version intégrée    |
|--------------------|---------------------|
| Integral IN        | à partir de 1.52    |
| Variocool*         | à partir de 1.76    |
| Universa           | toutes les versions |

\* Ethernet Modul Advanced (LRZ 930) requis



Application LAUDA Command

# Application LAUDA Command Professional

## L'excellence en matière de contrôle de la température

Les fonctions avancées, qui vont au-delà de l'application LAUDA Command, facilitent l'identification des tendances, les ajustements et la garantie d'une grande reproductibilité des processus de thermorégulation. La création et la gestion des profils de température programmés, la visualisation intuitive des données de température ainsi que l'enregistrement complet des données sont les éléments fondamentaux de l'application LAUDA Command Professional.



### LAUDA Command Professional

- **Tous les avantages de l'appli LAUDA Command**
- **Programmeur** : le programmeur permet de programmer, d'enregistrer et de démarrer un programme température-temps. Cinq programmes différents peuvent être enregistrés, qui peuvent être exportés et importés sur d'autres appareils
- **Évolution graphique de la température** : les évolutions de la température peuvent s'afficher sous forme de graphique et peuvent être exportées sous forme de fichiers images
- **Enregistrement des données** : les paramètres disponibles dans l'évolution graphique de la température peuvent être enregistrés et exportés pour des analyses ou des rapports supplémentaires
- **Régulation du débit** : Dans les thermostats, les débits volumétriques peuvent être réglés et affichés en combinaison avec la régulation du débit LAUDA (FC 80 MID, FC 80 C)

Numéro d'article : D000089

Ligne de produits

Version intégrée

Integral IN

à partir de 1.57 et supérieur

Universa

toutes les versions

Application LAUDA Command Professional



Commandez votre solution de thermorégulation LAUDA directement à partir de votre terminal mobile ou de votre PC. L'application LAUDA Command est rapidement installée et facilement configurée.



L'accès aux appareils est protégé par les normes de sécurité les plus élevées, telles que l'authentification à deux facteurs et HTTPS.



La compatibilité avec les applications sera en permanence déployée sur d'autres lignes de produits. Des fonctions innovantes sont développées en permanence afin d'élargir les fonctionnalités de l'application.

Démarrer votre appareil de thermorégulation LAUDA directement à partir d'un terminal mobile ou d'un PC : L'appli LAUDA Command vous permet de configurer et d'utiliser votre appareil de manière confortable et polyvalente.

Les noms de marque suivants sont des marques déposées de  
LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG:  
LAUDA Microcool®, LAUDA Universa®, LAUDA Variopumpe®,  
Kryomat®, Kryopac®, Mobifreeze®, Ultratemp®, Variocool®

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • Allemagne  
[www.lauda.de](http://www.lauda.de)

