

°LAUDA



BAINS-MARIE

Polyvalents, résistants, sûrs.

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Bains-marie LAUDA

La plus haute qualité avec un design de premier choix

Avec la ligne de produits Hydro, LAUDA élargit sa gamme dans le domaine du matériel de laboratoire. Avec cinq bains-marie, la ligne de produits Hydro offre l'équipement idéal pour chaque application laboratoire. La ligne LAUDA Hydro reflète l'expérience de longue date et la qualité. Grâce au design moderne LAUDA, à d'excellentes performances ainsi qu'à une grande variété d'accessoires, les équipements de laboratoire représentent ce qu'il y a de mieux en termes de qualité et de flexibilité.



Une grande diversité d'applications

Que ce soit pour thermoréguler, évaporer ou décongeler des échantillons, LAUDA Hydro propose toujours le bain-marie optimal doté de l'équipement parfaitement adapté à chaque exigence de laboratoire.



Conception bien étudiée du couvercle

Le couvercle de cuve à double paroi et à isolation thermique est bombé de l'intérieur. Le condensat retourne ainsi dans le bain sans tomber sur les échantillons et les pertes de chaleur sont réduites au minimum. Tous les bains-marie de la ligne Hydro sont équipés de série d'un couvercle de cuve.



Répartition homogène de la température

Le chauffage des bains-marie LAUDA Hydro se trouve directement sous le fond filtrant, ce qui permet de répartir la température de manière homogène et d'atteindre rapidement la température souhaitée.



Sûrs, fiables et résistants

Les bains-marie Hydro sont faciles à entretenir et garantissent un fonctionnement fiable en continu. Tous les bains-marie de la ligne Hydro sont protégés contre la surchauffe et contre la marche à sec. En présence d'une erreur, le chauffage s'arrête et émet une alerte optique et acoustique.



Commande intuitive

Les bains-marie LAUDA Hydro H 8 à H 41 sont équipés d'un écran TFT 3,5" moderne avec trois minuteries. La commande se fait au moyen de touches programmables.



Fabrication robuste de qualité supérieure

LAUDA Hydro est synonyme de qualité et de longévité. Le bain soudé et tout l'intérieur du bain sont en acier inoxydable. Le boîtier extérieur, résistant à la corrosion, est composé de tôle d'acier galvanisée et laquée époxy.

NOUVEAU



Bains-marie LAUDA Hydro

Applications et caractéristiques produit

Bains-marie Hydro

Bains-marie d'incubation / d'inactivation polyvalents

- Cinq modèles (8 à 41 l)
- Plage de température jusqu'à 100 °C (plage d'ébullition)
- Minuterie intégrée
- Contrôle de fonctionnement électronique avec alerte optique et acoustique en cas d'erreur

L'écran à contraste élevé affiche clairement toutes les données de processus en un coup d'œil. La minuterie intégrée offre trois options :

- Réglage d'un délai de mise en marche jusqu'à 999 h 59
- Démarrage du chronométrage après l'atteinte de la température cible
- Durée de fonctionnement jusqu'à 999 h 59



Chargement facile des échantillons grâce à des supports d'insertion adaptés



Affichage clair et utilisation simple et sûre

- Le cuve intérieure, l'élément chauffant, le cadre du couvercle, le couvercle et le fond du tamis sont en acier inoxydable
- Le chauffage intégré garantit des temps de chauffe courts et un contrôle précis de la température
- Une vanne de vidange à l'arrière complète les fonctionnalités

- Couvercle à double paroi en acier inoxydable avec système d'évacuation des condensats inclus
- Deux fusibles indépendants contre la surchauffe protègent les échantillons
- La grande hauteur utile permet une utilisation polyvalente de l'appareil



Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer



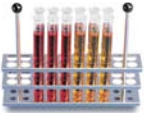
Conception ergonomique et utilisation flexible

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	Plage de température de fonctionnement °C	Constante de température K	Puissance de chauffe kW	Dimensions du bain (L x P x H) mm	Profondeur utile mm	Volume de remplissage min. L	Volume de remplissage max. L	Poids kg	Tension secteur	Numéro d'article
Bains-marie Hydro										
H 8	25 ... 100	±0,1	1,0	245×200×165	115	3,8	7,0	9,3	230 V; 50/60 Hz	L002901
H 16	25 ... 100	±0,1	1,5	400×245×165	115	7,5	13,9	13,3	230 V; 50/60 Hz	L002902
H 22	25 ... 100	±0,1	1,5	400×245×225	180	7,5	20,3	15,0	230 V; 50/60 Hz	L002903
H 24	25 ... 100	±0,1	1,5	600×245×165	115	11,3	20,9	17,2	230 V; 50/60 Hz	L002904
H 41	25 ... 100	±0,1	1,5	410×296×335	285	9,3	37,9	21,2	230 V; 50/60 Hz	L002905

Accessoires LAUDA Hydro

Pour tout type d'utilisation

	Désignation	H 8	H 16	H 22	H 24	H 41	Numéro d'article
	Pour bains-marie Hydro	pour un équipement maximal					
	Rack, acier inoxydable avec 20 ouvertures Ø 18 mm	4	8	8	12	9	A000015
	Rack, acier inoxydable avec 5 ouvertures Ø 31 mm	4	8	8	12	9	A000016
	Rack, acier inoxydable avec 20 ouvertures Ø 13 mm	4	8	8	12	9	A000017
	Rack pour bouteilles de lait avec 12 ouvertures Ø 56 mm	1	2	2	3	2	A000022
	Régulateur de niveau d'eau réglable	-	oui	oui	oui	oui	A000024
	Couvercle de bain, acier inoxydable avec 6 inserts annulaires, Ø 91 mm	-	oui	oui	-	-	A001578

	Désignation	Numéro d'article
	Pour toutes les catégories d'appareils Hydro Algicide très efficace à utiliser uniquement avec l'eau des bains thermostatés. Ce fluide permet de maintenir la charge bactériostatique et fongistatique de l'eau à un faible niveau.	
	Algicide Aquastab, jerrican de 5 L	LZB 129
	Algicide Aquastab, bouteille de 1 L	LZB 429
	Algicide Aquastab, bouteille de 100 ml	LZB 929

