

LAUDA



BAÑOS DE AGUA

Versátiles, resistentes y seguros.

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Baños de agua LAUDA

Máxima calidad con un diseño de primera

Con la línea de equipos Hydro, LAUDA amplía su gama de productos en el campo de la tecnología de laboratorio. Con cinco baños de agua, la gama de productos Hydro ofrece el equipamiento ideal para cualquier aplicación de laboratorio. Los equipos LAUDA Hydro acreditan la amplia experiencia y excepcional calidad. Con el moderno diseño LAUDA, los excelentes datos de rendimiento y una amplia oferta de accesorios, los equipos de laboratorio son sinónimo de la máxima calidad y flexibilidad.



Variedad de aplicaciones

Ya sea para regular la temperatura, evaporar o descongelar muestras: LAUDA Hydro ofrece el baño de agua óptimo con el equipamiento ideal para cualquier requisito de un laboratorio.



Diseño sofisticado de la tapa

La tapa para baño cuenta con doble pared y aislamiento térmico, y está provista de una curvatura interior. Esto hace que la condensación regrese al baño y evita que caigan gotas sobre las muestras. Además, se minimizan las pérdidas de calor. Todos los baños Hydro de agua están equipados de serie con una tapa para baño.



Distribución homogénea de la temperatura

La calefacción de los baños de agua LAUDA Hydro se encuentra justo debajo del fondo perforado, lo cual permite lograr una distribución homogénea de la temperatura y alcanzar rápidamente la temperatura deseada.



Seguros, fiables y resistentes

Los baños de agua Hydro requieren poco mantenimiento y garantizan un funcionamiento continuo fiable. Todos los baños de agua Hydro están protegidos contra el sobrecalentamiento y la marcha en seco. En caso de fallo, la calefacción se apaga y genera una alarma acústica y óptica.



Manejo intuitivo

Los baños de agua LAUDA Hydro H 8 a H 41 cuentan con una moderna pantalla TFT de 3,5" y tres funciones de temporizador. El manejo se realiza mediante softkeys.



Construcción robusta de alta calidad

LAUDA Hydro es sinónimo de calidad y durabilidad. El cuerpo soldado del baño y todo el interior son de acero inoxidable. La carcasa exterior es resistente a la corrosión y está fabricada en chapa de acero galvanizada con recubrimiento de polvo.

NUEVO



Baños de agua LAUDA Hydro

Aplicaciones y características del producto

Baños de agua Hydro

Versátiles baños de agua de incubación/inactivación

- Cinco modelos (8 a 41 l)
- Rango de temperatura hasta 100 °C (rango de ebullición)
- Temporizador integrado
- Control electrónico de funciones con aviso de alarma óptico y acústico en caso de error

La pantalla de alto contraste muestra todos los datos del proceso con claridad de un vistazo. El temporizador integrado ofrece tres opciones:

- Retardo de encendido de hasta 999:59 h:min
- Inicio del tiempo de funcionamiento tras alcanzar la temperatura objetivo
- Duración del tiempo de funcionamiento de hasta 999:59 h:min



Fácil carga de muestras con soportes de inserción adecuados



Pantallas claras y funcionamiento sencillo y seguro

- El recipiente interior, el elemento calefactor, el marco de la tapa, la tapa y la base del tamiz están fabricados en acero inoxidable
- El calentador integrado garantiza tiempos de calentamiento cortos y un control preciso de la temperatura
- Una válvula de drenaje en la parte posterior completa las características

- Se incluye una tapa de acero inoxidable de doble pared con drenaje de condensado
- Dos fusibles de sobretensión independientes protegen las muestras
- La gran altura útil permite un uso versátil de los dispositivos



Interior de acero inoxidable de fácil limpieza



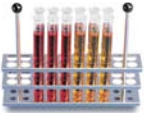
Diseño robusto y uso versátil

Datos técnicos

Modelo	Rango de temperatura de trabajo °C	Estabilidad de temperatura K	Potencia calorífica kW	Dimensiones del baño (anchura x profundidad x altura) mm	Profundidad útil mm	Volumen de llenado mín. L	Volumen de llenado máx. L	Peso kg	Alimentación eléctrica	Número de pedido
Baños de agua Hydro										
H 8	25 ... 100	±0,1	1,0	245×200×165	115	3,8	7,0	9,3	230 V; 50/60 Hz	L002901
H 16	25 ... 100	±0,1	1,5	400×245×165	115	7,5	13,9	13,3	230 V; 50/60 Hz	L002902
H 22	25 ... 100	±0,1	1,5	400×245×225	180	7,5	20,3	15,0	230 V; 50/60 Hz	L002903
H 24	25 ... 100	±0,1	1,5	600×245×165	115	11,3	20,9	17,2	230 V; 50/60 Hz	L002904
H 41	25 ... 100	±0,1	1,5	410×296×335	285	9,3	37,9	21,2	230 V; 50/60 Hz	L002905

Accesorios LAUDA Hydro

Para cualquier aplicación

	Denominación	H 8	H 16	H 22	H 24	H 41	Número de pedido
	Para baños de agua Hydro	Cantidad máx.					
	Soporte, acero inoxidable con 20 aberturas Ø 18 mm	4	8	8	12	9	A000015
	Soporte, acero inoxidable con 5 aberturas Ø 31 mm	4	8	8	12	9	A000016
	Soporte, acero inoxidable con 20 aberturas Ø 13 mm	4	8	8	12	9	A000017
	Portabotellas de leche con 12 aberturas Ø 56 mm	1	2	2	3	2	A000022
	Regulador del nivel de agua ajustable	-	Sí	Sí	Sí	Sí	A000024
	Tapa de bañera, acero inoxidable con 4 insertos anulares, Ø 91 mm	-	Sí	Sí	-	-	A001578

	Denominación	Número de pedido
	Para todas las categorías de equipos Hydro Alguicida de alta eficacia únicamente para el uso con agua en termostatos de baño. Este aditivo reduce la contaminación del agua con bacterias y hongos.	
	Alguicida Aquastab, bidón de 5 L	LZB 129
	Alguicida Aquastab, botella de 1 L	LZB 429
	Alguicida Aquastab, botella de 100 ml	LZB 929

