


由 LAUDA ULTRACOOOL 循环冷水机, 提供的 冷却水系统 是您的温度控制应用的完美补充

新一代 LAUDA Ultracool 系列循环冷水机, 用于提供冷却水。
具有超现代设计, 高效节能, 投资回报期短。



其他服务:
LAUDA 在产品、安全和服务方面都有成功的经验和良好的记录

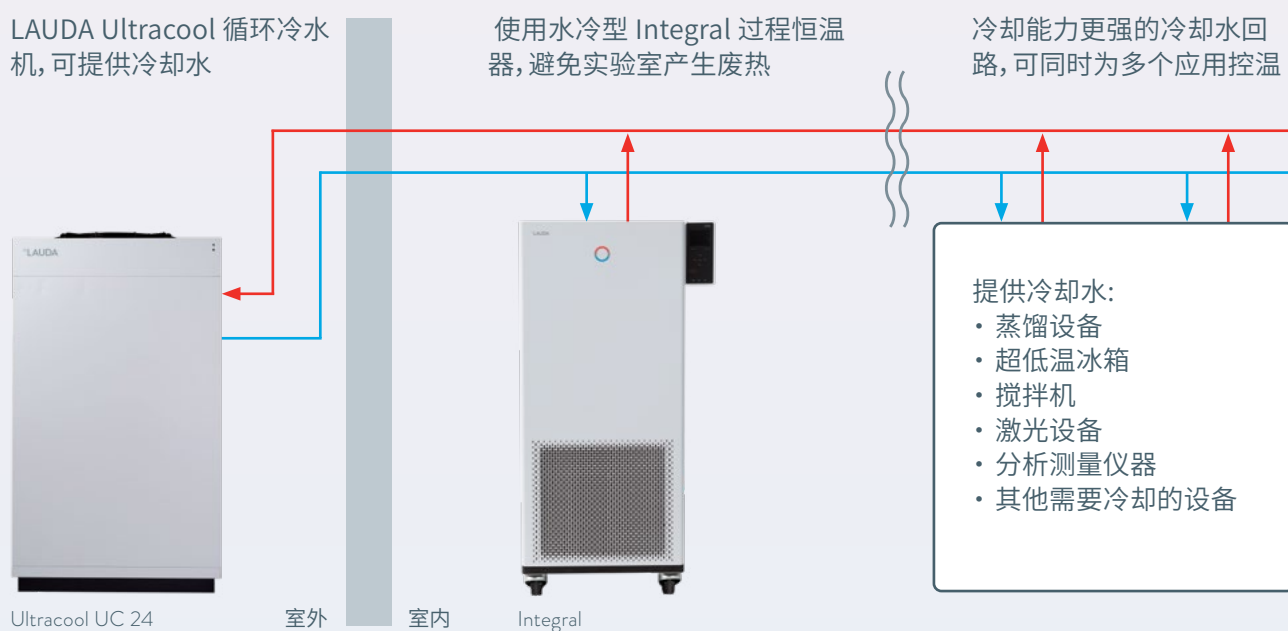

针对冷却水供应规划
的专业咨询服务



可接受委托, 对设备进行安
装认证和操作认证 (IQ/OQ)



为设备的预测性维护
提供远程支持

附件:
建议使用合适的软管、转接头和导热液体, 以确
保冷却水装置安全可靠的运行。丰富的 LAUDA
配件可为您提供完整的解决方案。



软管



转接头



导热液体

用于工艺恒温器的节能冷水机

LAUDA Integral 冷却水需求			LAUDA Ultracool 冷水机	
设备型号	最大产生的废热 kW	消耗量 L/min	设备型号 环境温度 25 °C 时	设备型号 环境温度 50 °C 时
IN 230 TW	4	3	UC 4	UC 4
IN 530 TW	10,2	15	UC 8	UC 14
IN 1330 TW	22,1	16	UC 24	UC 50
IN 250 XTW	3,8	3	UC 4	UC 4
IN 280 XTW	3,2	3	UC 4	UC 4
IN 590 XTW	9	16	UC 8	UC 14
IN 550 XTW	9,9	8	UC 8	UC 14
IN 950 XTW	16,2	20	UC 14	UC 50
IN 1590 XTW	31,5	26	UC 50	UC 50
IN 1830 TW	32,2	29	UC 50	UC 50
IN 1850 XTW, IN 2050 PW	34	26	UC 50	UC 50
IN 2560 XTW, IN 2560 PW	42,5	29	UC 50	UC 65
XT 4 HW	16	10	UC 14	UC 24
XT 8 HW	16	10	UC 14	UC 24


温度控制可靠, 操作安全

LAUDA Ultracool 循环冷水机, 设计紧凑, 有强大的制冷能力, 可即插即用, 并有冷却水容器、耦合泵和内置旁路。还有作为标准配置的超温断路器, 以防止热交换器冻结。集成式压力开关能保护电路, 防止压力过高或过低。冷水机的外壳由涂有环氧树脂的镀锌钢板制成, 即使在恶劣的生产环境中也能防腐蚀。



LAUDA Ultracool 循环冷水机, 节能可达50%

新一代 LAUDA Ultracool 循环冷水机, 在产品开发阶段便注重高效节能, 可为降低运营成本做出重要贡献。根据不同的运行条件, 新一代 Ultracool 最多可将能源成本降低 50%, 投资回收期不到一年。LAUDA Ultracool 循环冷水机, 在操作方式上有着创新的理念, 可以通过遥控器或者网络服务器, 对设备进行远程监控或远程操作。比如可以通过平板电脑或智能手机等移动设备, 方便地进行远程操作。

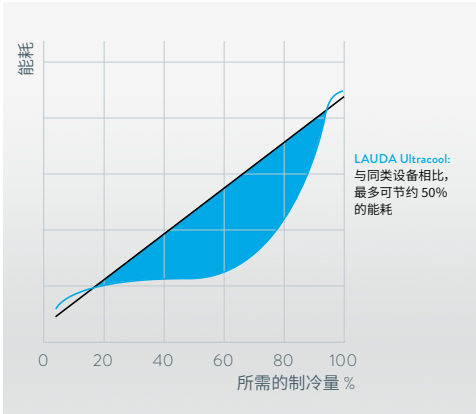

劳达贸易(上海)有限公司
LAUDA CHINA CO., LTD
地址: 上海市松江区民益路 201 号 6 幢 2 楼
销售热线: 4000 866 580
电子邮箱: info@lauda.cn 网站: www.lauda.cn

