


## PRODUCT DATA SHEET

### Integral IN 550 XTW

The new generation of the successful Integral XT process thermostats for professional temperature control in the temperature range from -90 to 320 °C: The powerful Integral XT process thermostats use the flow principle with cold oil superimposition. It allows users to use a wide temperature range with one temperature control medium. The electronically controlled, magnetically coupled eight-stage LAUDA Variopump allows the optimum thermal connection of the flow rate both for pressure-sensitive consumers and for applications with high hydraulic resistance. The modular interface concept ensures maximum networking of the user processes.



Working temperature min.  
-50 °C

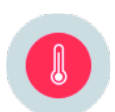

Working temperature max.  
220 °C

#### Technical Attributes

#### Integral IN 550 XTW

Working temperature min.	-50 °C
Working temperature max.	220 °C
Ambient temperature min.	5 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperature stability	0.05 ±K
Filling volume min.	4.8 L
Filling volume max.	17.2 L
Heater power	8.0 kW
Cooling output at 200°C measured with thermal oil	5.8 kW
Cooling output at 100°C measured with thermal oil	5.8 kW
Cooling output at 20°C measured with ethanol	5.8 kW
Cooling output at 10°C measured with ethanol	5.8 kW
Cooling output at 0°C measured with ethanol	5.4 kW
Cooling output at -10°C measured with ethanol	4.0 kW
Cooling output at -20°C measured with ethanol	2.6 kW

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE

T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobse

## PRODUCT DATA SHEET

### Integral IN 550 XTW

Technical Attributes	Integral IN 550 XTW
Cooling output at -30°C measured with ethanol	1.45 kW
Cooling output at -40°C measured with ethanol	0.55 kW
Cooling output at -50°C measured with ethanol	0.12 kW
Power consumption	11.0 kW
Pump connection thread	M30 x 1,5
Pump pressure max.	3.1 bar
Pump flow max. (pressure)	65 L/min
Dimensions (WxDxH) in mm	560x550x1325

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
 Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen  
 Postfach 1251 • 97912 Lauda-Königshofen • DE  
 T +49 (0) 9343 503-0 • F +49 (0) 9343 503-222  
 info@lauda.de • www.lauda.de  
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
 Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
 Sitz Lauda-Königshofen  
 Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
 Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert  
 Dr. Marc Stricker  
 Beirat: Dr. Gerhard Wobser